



## Toiletsæde Dania med låg, 50 mm forhøjet Med styrebuffer og specialbeslag tilpasset forhøjet sæde.

### Varenummer

R33000  
VVS: 615685000  
NRF: 6190584  
RSK: 7972415  
EAN: 5708590070520  
HMI: 1810  
NBS: N13:300  
DB: 2296029






Toiletsæde Dania, 5 cm forhøjet, med låg. Med specialbeslag tilpasset forhøjet sæde. Sædet er forsynet med styrebuffer, som sikrer at sædet sidder mere stabilt - også ved sideværts belastninger. Materialer: Duroplast.

### Farve

Hvid

### Beskrivelse

Toiletsæde Dania, 5 cm forhøjet, med låg. Med specialbeslag tilpasset forhøjet sæde. Sædet er forsynet med styrebuffer, som sikrer at sædet sidder mere stabilt - også ved sideværts belastninger. Materialer: Duroplast.

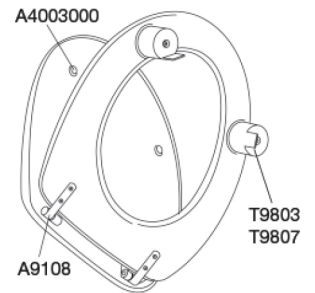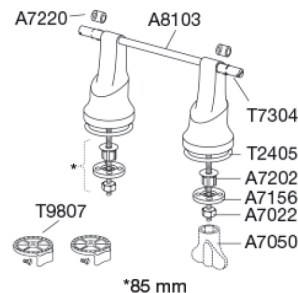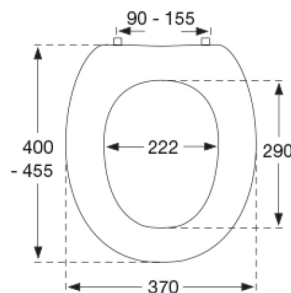

### Materialer

Sæde og låg: Hærdeplast (urea)

Hængsel: Rustfrit stål V2A

Toiletforhøjer: Nylon (PA)

Drejetapbuffer: ABS-plast

### Produktkapacitet

Dette produkt er testet statisk med 225 kg. Da den europæiske hjælpemiddelstandard DS/EN 12182:2012 foreskriver test med sikkerhedsfaktor 1,5 er produktets nominelle maksimalbelastning derfor 150 kg.

### Vægt

3,9 kg

### Vægt emballeret

4,2 kg



---

**Toiletsæde Dania med låg, 50 mm forhøjet  
Med styrebuffer og specialbeslag tilpasset forhøjet sæde.**

---

<b>Vægt pr. kolli</b>	4,2 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	1
<b>Kolli pr. palle</b>	60
<b>Antal pr. palle</b>	60
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af toiletsædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Til desinficering af sædet kan f.eks. anvendes ethanol 85%. Det er vigtigt at sædet aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering, og at det herefter aftørres med en tør og blød klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.
<b>Garanti</b>	<p>Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>